



COXINS POSICIONADORES EM GEL POLÍMERO



Apoio Circular Aberto



Ref.: 1360

Ref.: 1370

Ref.: 1101

Código	Modelo	Diâm. Ext.	Diâm. Int.	Altura
1101	Adulto	24 cm	8 cm	6 cm
1102	Adulto Baixo	24 cm	8 cm	4,5 cm
1103	Adulto P	17 cm	5 cm	5 cm
1360	Neonatal	8,4 cm	2 cm	2 cm
1370	Pediátrico	13 cm	3,5 cm	3 cm

Apoio Circular Fechado



Ref.: 1330

Ref.: 1340

Ref.: 1111

Código	Modelo	Diâm. Ext.	Diâm. Int.	Altura
1111	Adulto	24 cm	8 cm	5,5 cm
1112	Adulto Baixo	24 cm	8 cm	4,5 cm
1113	Adulto P	17 cm	5 cm	5 cm
1330	Neonatal	8 cm	4 cm	2,2 cm
1340	Pediátrico	12,5 cm	3,5 cm	3 cm

Protetor para Suporte de Crânio



Código	Modelo	Comprim.	Largura	Altura
1132	M	16 cm	6 cm	2 cm
1133	P	14 cm	6 cm	2 cm

Protetor para Suporte Mayfield



Código	Modelo	Comprim.	Largura	Altura
1134	M	18 cm	5,5 cm	4 cm
1135	P	15 cm	5,5 cm	4 cm

Almofada para Apoio de Cabeça



Ref.: 1390

Ref.: 1385

Ref.: 1380

Código	Modelo	Comprim.	Largura	Altura
1380	G	32 cm	32 cm	5 cm
1385	M	25 cm	25 cm	4 cm
1390	P	16 cm	16 cm	3 cm

Almofada Facial Peitoral em Espuma Viscoelástica



Código	Comprim.	Largura	Altura
6050	49 cm	54 cm	16 cm

Suporte Facial com Inclinação Frontal em Espuma Viscoelástica



Código	Comprim.	Largura	Altura
2520	31 cm	31 cm	10 cm

Sup. Facial Anatômico em Espuma Viscoelástica (Canal Superior)



Código	Comprim.	Largura	Altura
2505	29 cm	24 cm	14 cm

Modelos Anatômicos

Código	Modelo	Foto	Medidas	Descrição
1121	Suporte Facial Anatômico		34 x 29 x 11,5 cm	Confortável, possibilita a intubação em decúbito ventral. Fácil limpeza e transporte.
1128	Suporte Facial Anatômico P		27 x 24 x 8 cm	Confortável, possibilita a intubação em decúbito ventral. Fácil limpeza e transporte.
1122	Suporte Facial Anatômico Bi-Partido		30 x 23 x 13 cm	Parte superior em gel e base em espuma revestida com borracha de PU. Espaçamento regulável entre as peças. Espelho de plástico sob a base.
1125	Suporte Facial Anatômico Para Decúbito Ventral e Lateral		35 x 35 x 9 cm	Confortável, possibilita a intubação em decúbito ventral sem desconectar o tubo. Pode ser utilizado também para decúbito lateral.
1124	Suporte Facial Anatômico Para Decúbito Ventral e Lateral P		17 x 17 x 5,5 cm	
1127	Suporte Facial Anatômico Flex		30 x 30 x 12 cm	Para decúbito ventral, dorsal e lateral. Menor elevação da cabeça. Base em espuma com orifício maior, na parte central da peça.
1126	Suporte Facial Anatômico para Clínicas		30 x 30 x 8 cm	Indicado para macas de clínicas com cabeceiras com orifício. Para decúbito ventral, dorsal ou lateral.
1129	Almofada Facial Para Decúbito Ventral		29 x 29 x 9 cm	Indicado para o posicionamento de pacientes na posição prona. Possui ampla abertura central e na região do maxilar, para maior conforto.
1130	Almofada Facial Para Decúbito Ventral Flex		29 x 29 x 13 cm	Indicado para pacientes na posição prona. A abertura na região do queixo facilita o posicionamento do paciente sem remover a conexão do tubo de intubação.
1150	Suporte Occipital Anatômico		32 x 22 x 7 cm	Posiciona muito confortavelmente a cabeça e região cervical em decúbito dorsal. Usado também para procedimentos oftalmológicos.
1151	Suporte Occipital Anatômico P		25 x 16 x 4 cm	
1131	Suporte Occipital e Lateral		30 x 24 x 8 cm	Acomoda a cabeça em decúbito dorsal ou lateral.
2500	Suporte Facial em Espuma Viscoelástica Recoberta		24 x 30 x 15 cm	Macio e confortável. Reutilizável. Recoberto com gel de PU de alta resistência mecânica. Resistente a produtos de desinfecção.

* Consulte nosso site para mais imagens, informações técnicas e medidas detalhadas.

Apoio Meio-Rolete



Vista Diagonal



Vista Frontal



Vista Lateral

Código	Modelo	Comprim.	Largura	Altura
1610	15/5	15 cm	8 cm	5 cm
1611	20/5	20 cm	8 cm	5 cm
1612	25/5	25 cm	8 cm	5 cm
1613	35/5	35 cm	8 cm	5 cm
1614	45/5	45 cm	8 cm	5 cm
1620	15/7,5	15 cm	9,5 cm	7,5 cm
1621	20/7,5	20 cm	9,5 cm	7,5 cm
1622	25/7,5	25 cm	9,5 cm	7,5 cm
1623	30/7,5	30 cm	9,5 cm	7,5 cm
1624	48/8	48 cm	9,5 cm	8 cm
1630	14/10	14 cm	8,5 cm	10 cm
1631	22/10	22 cm	8,5 cm	10 cm
1632	34/10	34 cm	10 cm	10 cm
1633	40/10	40 cm	12 cm	10 cm
1634	35/10	35 cm	15 cm	10 cm
1635	45/12	45 cm	20 cm	12 cm
1636	50/10	50 cm	20 cm	10 cm
1637	B-50/10	50 cm	10 cm	10 cm
1640	30/15	30 cm	15 cm	15 cm
1641	40/15	40 cm	20 cm	15 cm
1642	55/15	55 cm	20 cm	15 cm

Posicionador de Coluna Espuma + Gel



Indicado para posicionamento em decúbito ventral. Base em espuma viscoelástica recoberta e placa de gel.

Código	Medidas
1910	48 x 60 x 18 cm


Almofada para Decúbito Ventral



Indicado para posicionamento em decúbito ventral. Possui duas camadas em espuma (d-28 e viscoelástica), e placa de gel.

Código	Modelo	Medidas
1920	Com Gel	105 x 52 x 16 cm
1921	Sem Gel	105 x 52 x 14,5 cm

Almofada Peitoral para Estereotaxia

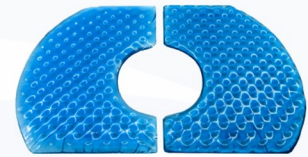

Absorve confortavelmente a pressão sobre a região peitoral, permitindo que a região das mamas fique livre durante o procedimento.

Código	Modelo	Medidas
1891	Direito	40 x 55 x 2 cm
1892	Esquerdo	40 x 55 x 2 cm

Almofada Para Elevação Torácica Curva



A inclinação auxilia o posicionamento adequado da região peitoral em decúbito dorsal.

Código	Medidas
1880	50 x 47 x 5 cm

Almofada Torácica Com Rampa



A inclinação auxilia no posicionamento adequado da região peitoral em decúbito dorsal.

Código	Medidas
1881	40 x 26 x 4/6 cm

Almofada Peitoral



Utilizada para posicionar confortavelmente a região peitoral em decúbito ventral.

Código	Modelo	Medidas
1882	Esquerdo	75 x 28 x 7 cm
1883	Direito	75 x 28 x 7 cm

Almofada Torácica



Apoio da caixa torácica em decúbito ventral, proporcionando elevação e conforto para a região peitoral.

Código	Medidas
1888	42 x 16 x 11 cm
1889	50 x 16 x 11 cm

Kit Elevação Torácica e Sup. Coluna Pediátrico



Indicado para a elevação torácica e o posicionamento da coluna em decúbito ventral.

Código	Medidas
1915	45 x 12 x 10 cm

Almofada Peitoral Curta



Posiciona o paciente confortavelmente em decúbito ventral.

Código	Medidas
1930	32 x 52 x 16/5 cm

Apoio Calcâneo Anatômico



Sustenta confortavelmente o tendão de Aquiles, deixando os calcanhares livres.

Código	Medidas
1410	21,5 x 13,5 x 6,5 cm


Liberador de Calcâneo Anatômico



Indicado para posicionamento dos calcanhares em decúbito dorsal, principalmente para pacientes mais pesados ou de estatura alta.

Código	Medidas
1412	27 x 20 x 6 cm

Bota Protetora Para Suporte de Tornozelo e Calcânhar

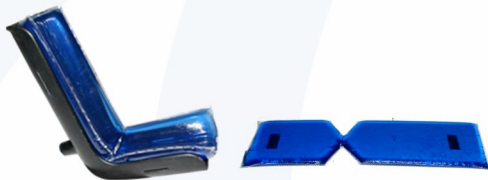

Proporciona maior conforto ao suporte de tornozelo e calcânhar. Fixação com fitas e velcro.

Código	Medidas
1430	35+23 x 19 x 1,5 cm

Bota Protetora Para Calcânhar



Protege o calcânhar. Fechamento em velcro.

Código	Medidas
1431	17,5 x 13 x 17 cm

Protetor Para Suporte de Coxa



Proporciona excepcional conforto nos procedimentos que requerem sustentação das pernas.

Código	Medidas
1440	42 x 29 x 1,5 cm

Protetor Para Suporte Perineal



Indicado para procedimentos de tração das pernas. Fechamento com velcro permite o ajuste a vários diâmetros do suporte.

Código	Medidas
1450	24 x 24 x 1,5 cm

Suporte Para Elevação dos Joelhos



Para a elevação dos joelhos em decúbito dorsal.

Código	Medidas
1415	49 x 19 x 9 cm

Almofada Trapézio



Utilizada para separação das pernas.

Código	Medidas
1884	30 x 17 x 9 cm


Apoio Para o Braço



Posiciona confortavelmente os braços.

Código	Modelo	Medidas
1771	P	40 x 15 x 2 cm
1772	M	50 x 15 x 2 cm
1773	G	60 x 15 x 2 cm

Apoio Anatômico Para o Braço

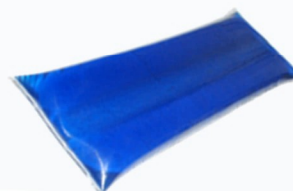

Posiciona confortavelmente os braços. Formato anatômico.

Código	Modelo	Medidas
1710	P	40 x 15 x 5 cm
1720	M	50 x 15 x 5 cm
1730	G	60 x 15 x 5 cm

Protetor Para Suporte de Braço



Acomoda confortavelmente os braços. Fixação através do próprio filme de PU, dispensando o uso de velcro.

Código	Medidas
1755	35 x 18 x 1,5 cm

Protetor Para Suporte de Ombros



Protege os ombros. Fixa-se no suporte através do próprio filme de PU. Removível, resistente e de fácil limpeza.

Código	Medidas
1750	17 x 7 x 3 cm

Protetor de Cotovelo



Auxilia na proteção do nervo ulnar. Fechamento em velcro.

Código	Medidas
1760	45 x 19 x 1,5 cm


Suporte para Pulso



Possui curvatura que proporciona melhor posicionamento do pulso.

Código	Medidas
1765	30 x 21 x 7 cm


Cunha Para Ombros e Braços

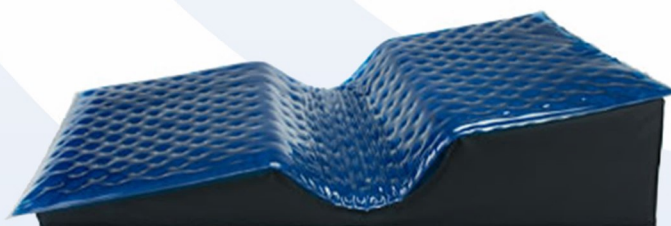

Acomoda confortavelmente o ombro, braço e cotovelo. Base em espuma convencional D-28 e placa de gel.

Código	Medidas
1521	70 x 50 x 16/2,5 cm

Placas Protetoras em Gel

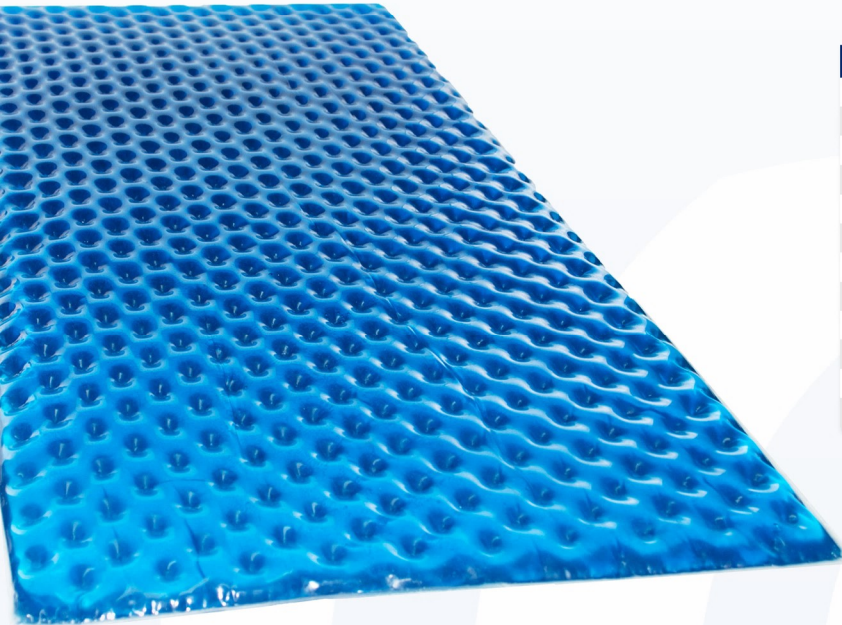

Código	Modelo	Compr. (cm)	Larg. (cm)	Altura (cm)
1810	A	30	10	1,5
1840	B	40	10	1,5
1841	C	60	12	1,5
1842	D	40	16	1,5
1843	E	61	16	1,5
1815	F	30	25	1,5
1816	G	30	30	1,5
1820	H	45	30	1,5
1850	J	50	50	1,5
1830	K	55	50	1,5
1870	L	100	50	1,5
1871	M	115	50	1,5

Utilizadas como protetoras para diversas aplicações. Fabricamos outras medidas sob encomenda. Consulte nosso departamento técnico.

Almofada Sacral Anatômica



Absorve confortavelmente a pressão exercida sobre a região sacral.

Código	Medidas
1510	45 x 45 x 2 cm

Almofada Sacral Para Mesa Ortopédica



Absorve a pressão de cisalhamento exercida sobre a região sacral.

Código	Medidas
1515	40 x 40 x 2 cm

Kit Protetor Sacral



Placa base acomoda a região sacral, almofadas longitudinais transferem o peso do paciente para costas e coxas. Ajustável com velcro.

Código	Medidas
1518 - Placa Base	48 x 43 x 2 cm
1518 - Almof. Costas	18 x 43 x 2 cm
1518 - Almof. Coxas	20 x 43 x 5 cm

Almofada Universal



Posiciona o peito em decúbito dorsal. Tamanhos e alturas variáveis.

Código	Medidas
1541	30 x 12 x 4 cm
1542	40 x 12 x 4 cm
1543	50 x 12 x 4 cm
1561	30 x 15 x 6 cm
1562	40 x 15 x 6 cm
1563	50 x 15 x 6 cm

Almofada Lombar



Proporciona conforto à região lombar.

Código	Medidas
1520	35 x 18 x 3,5 cm

Protetor para Ilíaco (Suporte McGuire)



Fixa-se no suporte McGuire através de encaixe e protege a região ilíaca confortavelmente.

Código	Medidas
1760	9 x 9 x 4,5 cm

Garantia e Durabilidade

A garantia dos produtos é de 6 meses e sua durabilidade poderá superar alguns anos, mas dependerá muito dos cuidados adequados no uso, na limpeza, no transporte e na estocagem. Siga as nossas recomendações.

Manuseio e Estocagem

- ✓ Não utilizar ou repousar material cortante ou pontiagudo na superfície do coxim;
- ✓ Transportar com cuidado e não submeter a quedas;
- ✓ Não repousar materiais pesados sobre sua superfície por longos períodos;
- ✓ Não tracionar a peça e nem submeter a peso ou pressão excessiva;
- ✓ Não submeter o produto a temperatura superior a 50°C.

Limpeza e Desinfecção

Nossos coxins possuem resistência química nos processos de desinfecção aos produtos à base de:

- ✓ Álcool Etilico a 70%;
- ✓ Detergente Neutro;
- ✓ Cloreto de Di-metil amônio (Quaternário de Amônio);
- ✓ Peróxido de Hidrogênio Acelerado;
- ✓ Amilfenol;
- ✓ Hipoclorito de Sódio a 1%;
- ✓ Cloroxilenol;
- ✓ Gluconato de Cloro-hexidina;
- ✓ Iodopovidona.

A escolha do desinfetante e/ou produto de limpeza é de responsabilidade do usuário. Caso o produto a ser utilizado não conste na lista acima, consulte nosso Depto.Técnico para se assegurar de que o filme de PU irá resistir.

Características do Gel

O gel consiste de uma dispersão de co-polímero em óleo mineral grau FDA. Sua consistência é firme e não vaza se o filme for perfurado. Possui características viscoelásticas, embora não tão acentuadas como as espumas viscoelásticas de PU. Ajuda também na dispersão da temperatura gerada pelo corpo, proporcionando uma sensação mais agradável.

Alguns produtos possuem toque mais macio, quando requerido pela sua aplicação, como nos itens para uso pediátrico, por exemplo.

A cor azul escuro é resultante da dispersão de corante azul no óleo mineral e a variação na sua intensidade é resultante das condições inerentes ao processo de fabricação e não interfere na performance do produto final.

Características do Filme

Utilizamos filme de Poliuretano Termoplástico cristal de 250 microns de alta resistência mecânica, largamente utilizado para essa aplicação em outros países.

O filme de PU é bastante resistente, mas caso ocorra uma perfuração por algum motivo indesejável, recomendamos descartar o produto. O uso de fitas adesivas pode possibilitar o acúmulo de impurezas e contaminações.

O filme de PU utilizado em nossos coxins foi aprovado nos testes de biocompatibilidade conduzidos pelos laboratórios Ecolyzer, sendo estes: **Avaliação do Potencial de Citotoxicidade "in vitro"**, **Detecção de Irritação Cutânea Primária** e **Detecção da Sensibilização Dérmica**. Em caso de interesse, solicite cópias dos relatórios completos através do email vendas@viscomed.com.br

Responsabilidade pela Escolha e Uso

Nossos coxins posicionadores tem o objetivo de proporcionar conforto no posicionamento dos pacientes. A escolha do coxim específico para determinado uso e função é de inteira responsabilidade do usuário. Nossa indicação de itens resulta da nossa experiência na fabricação dos produtos através dos anos e é apenas sugestiva, não representando garantia de performance. Consulte nosso departamento técnico para esclarecimentos complementares.